





# Silk'n™

Beautiful Technology

## Lipo H5001

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- EN USER MANUAL
- FR MODE D'EMPLOI
- BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SL PRIROČNIK ZA UPORABNIKA
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



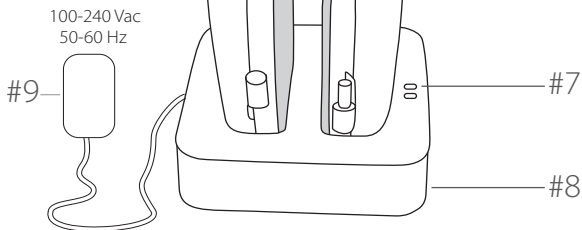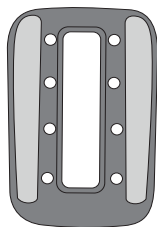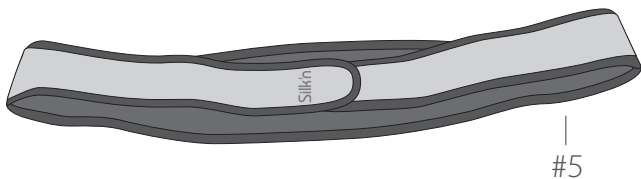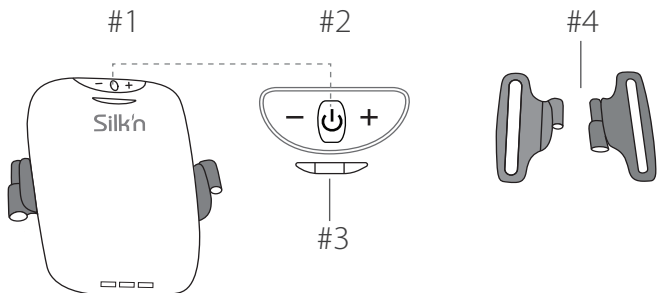

# Tartalomjegyzék

1.	Figyelmeztetések és ellenjavallatok .....	101
2.	Biztonságos használat Silk'n Lipo .....	107
3.	Ismerje meg a Silk'n Lipo eszközt .....	107
4.	Az eszköz vezérlői és beállításai .....	109
5.	Kezelési terv .....	113
6.	Mire számíthat – Silk'n Lipo .....	114
7.	Kezdjük el! .....	115
8.	Tisztítás és karbantartás .....	116
9.	Részek és cserealkatrészek .....	118
10.	Hibaelhárítás .....	118
11.	Ügyfélszolgálat .....	119
12.	Jótállás .....	119
13.	Ártalmatlanítás .....	119
14.	Műszaki adatok .....	120
15.	Jelek és szimbólumok .....	122

## 1. Figyelmeztetések és ellenjavallatok

---

Ez a használati útmutató az Európai Unió hatályban lévő szabványain és jogszabályain alapszik. Külföldi tartózkodás esetén tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket.

Silk'n Lipo rendkívül hatékony elektromos eszköz, ezért használata során mindig tartsa szem előtt a biztonságot. Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot. Javasoljuk, hogy minden kezelés előtt újból olvassa végig a kézikönyvben lévő használati útmutatót.

- ⦿ Ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyzás közben.
- ⦿ Mindig gondoskodjon arról, hogy kezei szárazak legyenek, mielőtt a tartót/töltőkészüléket az áramellátásra csatlakoztatja.
- ⦿ Tartsa az adaptert a víztől távol. Az adapter nem vízálló.
- ⦿ Ne helyezze vagy tárolja a kezelőegységeket, a tartót/töltőkészüléket és az adaptert olyan helyen, ahonnan az leeshet, beleeshet a kádba, a mosdóba, a vízbe vagy bármilyen más folyadékba.

- Ne érjen hozzá a tartóhoz/töltőkészülékhez vagy az adapterhez, ha az vízbe esett. Helyreállításuk előtt azonnal húzza ki azt az áramforrásból. Áramütést szenvedhet, ha a tartót/töltőkészüléket nem húzza ki az áramforrásból!
- Soha ne használja az adaptert, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha az nem megfelelően működik, vagy vízbe merült. Ennek bekövetkezése esetén azonnal húzza ki az adaptert az áramforrásból.
- Ha a tartót/töltőkészülék hibásan működik, azonnal húzza ki.
- Szárítsa meg az összes kezelőegységet a töltés vagy a tárolás előtt.
- Tárolás előtt szárítsa meg az összes elektróda lapot.
- Csak jogosultsággal rendelkező személyzet végezhet javításokat a készüléken. Ne próbálja meg módosítani, felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának.
- Ha a készüléket a megfelelőségéért felelős fél előzetes engedélye nélkül változtatja meg, akkor a felhasználó nem jogosult a készülék használatára.

- Ne használja, ha az ebben a kézikönyvben szereplő alkatrészeket vagy tartozékokat a gyártó nem szállította, illetve ha az eszköz sérült, vagy úgy tűnik, hogy nem megfelelően működik. Ezen esetekben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Ne tisztítsa a részeket mosogatógéiben.
- Gyerekek nem játszhatnak a (műanyag) csomagolással. Megsérülhetnek a csomagolóanyag által, vagy lenyelhetik az apró alkatrészeket és megfulladhatnak.
- Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként. A részletekért lásd a következő részt: 13. Ártalmatlanítás.
- A készülék selejtezése előtt a készülékből el kell távolítani az akkumulátort.
- Ha kiveszi az akkumulátort, akkor a készüléket a fő áramforrásról le kell választani.
- Az akkumulátort biztonságosan kell hulladékként elhelyezni.

- Az akkumulátor hulladékként való elhelyezésekor figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat. Ne dobja a használt akkumulátorokat a szemetesbe. A környezet védelmének érdekében kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a kereskedőjével.

## **Akkumulátor eltávolítása**

Az akkumulátor eltávolításához a készüléket szét kell törni. Ha ez megtörténik, akkor a készülék már a továbbiakban nem működik, valamint nem is javítható. Mindennemű garancia megszűnik, ha a készülék burkolata eltörött, és az akkumulátor pedig eltávolításra került. Biztonsági védőszemüveg és kesztyű viselése erőteljesen ajánlott.

Az ezen eljárásból adódó fizikai, vagy anyagi sérülésekért a Home Skinovations Ltd nem vállal felelősséget.

Az akkumulátor eltávolításához helyezze a kezelőegységeket egy kemény, erős felületre. Kalapáccsal törje be a külső műanyag burkolatot.

Csipesszel vagy csavarhúzóval vegye le a burkolatot. Csavarozza ki a NYÁK-ot (nyomtatott áramköri lap), és távolítsa el az akkumulátort úgy, hogy azt leválasztja a NYÁK-ról.

## Ellenjavallatok

- Silk'n Lipo gyerekek, mozgáskorlátozottak, korlátozott érzékelő képességekkel és értelmi fogyatékkal élők, valamint a készülék használatában járatlan vagy azt nem ismerő felhasználók számára a készülék használata tilos. Tartsa távol az eszközt a gyermekektől.
- Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használjon alacsonyabb EMS-energia-szintet.
- Azonnal hagyja abba a használatot, ha bőre nagyon piros, vagy ha hólyagosodást vagy égést tapasztal.
- Tiszta, száraz, egészséges bőrön használja.

## Ne használja, ha:

- szívproblémája van és nem konzultált orvosával.
- immunszuppresszáns gyógyszereket, például kortikoszteroidokat szed, és nem konzultált orvosával, vagy ha immunrendszeri betegsége van.
- bármilyen rákos betegségben szenved.
- nyirokrendszeri betegségben, pajzsmirigy-betegségben vagy májbetegségben, illetve emésztőrendszeri megbetegedésben szenved.



- ⊙ szívritmus-szabályozója, belső defibrillátora, illetve egyéb aktív elektromos implantátuma van bármely testrészén.
- ⊙ fémionokat tartalmazó ideiglenes oldatot alkalmazott a kezelés területén.
- ⊙ epilepsziában szenved.
- ⊙ súlyos artériás keringési zavarban szenved az alsó végtagjain.
- ⊙ hasi vagy lágyéksérve van.
- ⊙ terhes vagy szoptat.

### **Ezen testrészeken ne használja:**

- ⊙ A szív közelében. Az elektródákat ne helyezze a mellkas elülső részére (ahol a bordák és a szegycsont van), különösen a két nagy mellizomra. Ez növelheti a pitvari fibrilláció kockázatát és szíveálláshoz vezethet.
- ⊙ A mellkas hátsó oldalán.
- ⊙ A fejen vagy a nyakon.
- ⊙ A nemi szerveken.
- ⊙ Szemeken vagy azok körül.
- ⊙ Tetovált területeken.
- ⊙ Köszvényes vagy krónikus fájdalom által érintett területeken.

- Duzzadt, fertőzött vagy gyulladt területeken; repedezett vagy irritált bőrön, illetve ahol bőrkítüremkedések vannak (pl. bőrkíütések, visszérgyulladás, vénás gyulladás, trombózis, visszértágulat, illetve műtéti hegek, ahol a gyógyulási folyamatot befolyásolhatja stb.).
- Olyan testrészeken, amelyeken fém kapcsok, implantátumok vagy tűk vannak; illetve ha fém közelében van. Vegye le az ékszereket vagy egyéb tartozékokat a kezelési területről a kezelés ideje alatt.
- Olyan területeken, ahol korábban rák volt vagy esetlegesen bőrrák van.

## 2. Biztonságos használat Silk'n Lipo

---

A Silk'n készülék esetében a biztonság a legfontosabb. A Silk'n Lipo a következő biztonsági funkciókkal rendelkezik:

- **Közelség érzékelő:** Az eszköz csak bekapcsolt állapotban és akkor működik, amikor jól érintkezik a bőrrel.
- **Automatikus kikapcsolás:** Bár tetszés szerint leállíthatja a kezelést, az eszköz körülbelül egy perc után kikapcsol, ha nem érintkezik bőrével (az **üzemjelző lámpa** folyamatosan zölden világít). 15 perces folyamatos használat után is automatikusan kikapcsol.

## 3. Ismerje meg a Silk'n Lipo eszközt

---

A Silk'n Lipo rendszerének segítségével bizonyos területeken fizikai erőfeszítés nélkül csökkenthető a zsír és edzhetők az izmok és bizonyos testrészek formázhatók vele, mindez otthonának kényelmében.

A **kezelőegység**<sup>1</sup> célterületekre – felkar, has, fenék vagy comb – helyezésével a zsír lebontható és eltávolítható az adott területről. Segíthet egyes területek formálásában, amelyek diétára vagy mozgásra nem reagálnak. A Silk'n Lipo nem általános zsírcsökkentő vagy fogyókúrás eszköz, és nem helyettesíti a diétát vagy a mozgást.

<sup>1</sup> Az egyes szám az egyes és többes számú alkatrészeket jelenti a következők esetében: **kezelőegység, öv és elektróda lap**.

### 3.1. A csomag tartalma

- 1 vagy több kezelőegység \*
- 2 csatlakozó
- 1 vagy több testöv \*
- 1 vagy több elektróda lap \*
- Tartó/töltőkészülék
- Adapter
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

\* A megvásárolt összeállítástól függ.

### 3.2. Az eszköz leírása

A Silk'n Lipo otthoni használatra készült eszköz, amely alacsony szintű lézertechnológiát (Low Level Laser Technology, LLLT) és elektromos izomstimulációt (Electrical Muscle Stimulation, EMS) alkalmaz. Ezen energiák együtt segítik az izomtónust, csökkentik a zsírsavakat és zsírlerakódásokat a test tonizálása és átformálása érdekében.

A Silk'n Lipo termékhez a kezelni kívánt területhez megfelelő többféle öv tartozik. Minden kezelőegység lézertiódákat és elektródákat tartalmaz, amelyek az EMS-t aktiválják. Minden kezelőegységet az övre kell csatlakoztatni, majd a tonizálni és átalakítani kívánt testrésze kell helyezni. A Silk'n Lipo beépített újratölthető akkumulátorokat tartalmaz, amelyek használat előtt könnyen feltölthetők.

Tekintse meg a használati útmutató elején lévő ábrát, hogy hol találhatóak az eszköz egyes részei.

1. Kezelőegység
2. Kezelőgomb
3. Jelzőlámpák
4. Csatlakozók
5. Testöv
6. Elektróda lap
7. Töltésjelző lámpák
8. Tartó/töltőkészülék
9. Adapter

### 3.3. Rendeltetészerű használat


A Silk'n Lipo nem invazív esztétikai eszköz, amely csökkenti a derék, a karok, a combok és a fenék körfogatát. Az eszköz ezenkívül javítja az izomtónust és az izomerőt, és erősíti az izmokat ezeken a területeken.

Az eszköz nem alkalmas terápiában való használatra, illetve egészségügyi probléma vagy betegség kezelésére. Ne használja más célra, mint ami ebben a használati utasításban szerepel.


## 4. Az eszköz vezérlői és beállításai

### 4.1. A részek csatlakoztatása


1. Vegye ki a részeket a dobozból.
2. Helyezze a **kezelőegységet** sík felületre. Egynél több **kezelőegység** esetén csatlakoztassa azokat egymáshoz.
3. Fogja meg a belső menetes **csatlakozót** és dugja be azt a **kezelőegység** bal oldalába. Ezután a külső menetes **csatlakozót** csatlakoztassa a jobb oldalhoz.

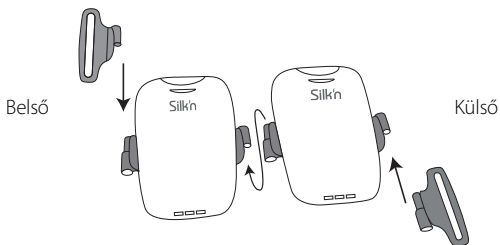

4. Válassza ki a kezelendő testrésznek megfelelő **övet**, és helyezze azt sík felületre úgy, hogy a Silk'n logó Ön felé nézzen.
5. Ezután hajtsa be az **övet** minden oldalát úgy, hogy lássa a fekete tépőzárakat.

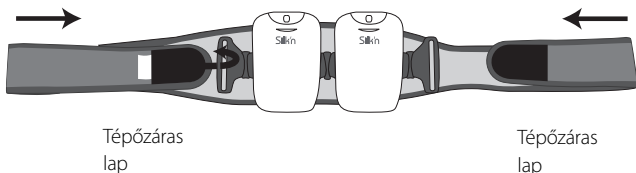

6. Csúsztassa az **öv** végeit a **csatlakozókba**, majd hajtsa visszafelé, hogy a tépőzár az **övre** tapadjon. Az **öv** így néz ki.

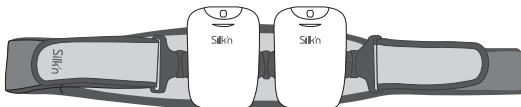

7. A Silk'n Lipo használatához természetesen az egyik oldalt le kell választania, és az **övet** a testre helyezve csatlakoztassa újra a leválasztott oldalt!

**i** Csak akkor használhatja az eszközt, ha:

- a **kezelőegység** fel van töltve.
- nedves **elektroda lapot** helyezett minden **kezelőegységre** (lásd a 4.4. Az elektroda lapok nedvesítése. részt).
- minden **kezelőegység** jól érintkezik a bőrrel.
- elolvasta ezt a kézikönyvet és megértette az eszköz használatát.




## 4.2. Vezérlők és beállítások



Akkumulátor / Hiba    Használat    Nincs használatban

Minden **kezelőegységen** van egy vezérlő panel, amely a következőket tartalmazza:

- **kezelőgomb** (#2)
- 2 EMS energiaszint gomb (a **kezelőgomb** bal és jobb oldala)
- 2 **jelzőlámpa** - bal és középső (#3)

Kezelés	Művelet	Funkció
Kezelőgomb 	Hosszú megnyomás	<ul style="list-style-type: none"> <li>A <b>kezelőegységet</b> be (vagy ki) kapcsolja. Bekapcsoláskor rövid vibrálás érezhető. Kikapcsoláskor 2 rövid vibrálás érezhető.</li> <li>A zöld <b>üzemjelző lámpa</b> (középső) folyamatosan zölden világít.</li> </ul>
+ Gomb 	Rövid megnyomás	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minden nyomással növeli az EMS szintet. A szintek növelésével az <b>üzemjelző lámpa</b> gyorsabban villog.</li> </ul>
	Hosszú megnyomás	<ul style="list-style-type: none"> <li>A rövid megnyomással azonos hatású.</li> </ul>
- Gomb 	Rövid megnyomás	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minden nyomással csökkenti az EMS szintet. A szintek csökkentésével az <b>üzemjelző lámpa</b> lassabban villog.</li> </ul>
	Hosszú megnyomás	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az EMS szint nullára állítása.</li> </ul>
Akkumulátor / Hibajelző lámpa (bal)	A narancssárga lámpa folyamatosan villog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akkumulátor töltése alacsony.</li> </ul>
	Folyamatos narancssárga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eszközhiba.</li> </ul>
Üzemjelző lámpa (középső)	A zöld lámpa folyamatosan villog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az eszköz be van kapcsolva és jól érintkezik a bőrrel.</li> <li>Az EMS szint növekedésével gyorsabban villog.</li> </ul>
	Folyamatos zöld	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nem érintkezik a bőrrel, de az eszköz használatra kész.</li> <li>Az eszköz kb. egy perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem érintkezik a bőrrel.</li> </ul>
Jelzőlámpa (jobb)	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nincs használatban.</li> </ul>

### 4.3. Energiaszint


A Silk'n Lipo többszintű elektromos izomstimulációt (EMS) tesz lehetővé. Ezáltal kiválóan szabályozható az izomstimulálás intenzitása, amelyet a kezelendő testrészeken alkalmazni kíván. Ezenfelül kezelés közben tetszőleges gyakorisággal válthat a szintek között.

- **Az EMS szint növelése:** Röviden nyomja meg a **+ gombot** annyiszor, amennyiszer a kényelmes EMS szint beállításához szükséges. Látható, hogy az **üzemjelző lámpa** gyorsabban villog, amint növeli az EMS szintet.
  - **Az EMS szint csökkentése:** Röviden nyomja meg a **- gombot**, amennyiszer szükséges (lásd a 4.2. Vezérlők és beállítások. részt).
  - **Az EMS szint visszaállítása nullára:** Hosszan nyomja meg a **- gombot**.
- i** Az EMS szintek csak akkor módosíthatók, ha a **kezelőegység** jól érintkezik a bőrrel. Ha nem jól érintkezik a bőrrel, az EMS nullára csökken.

#### 4.4. Az elektróda lapok nedvesítése

Az **elektróda lapok** az EMS működéséhez szükségesek, és azoknak a kezelés megkezdése előtt nedveseknek kell lenniük.

1. Nedvesítse meg az összes **elektróda lapot** nedves kendővel vagy nedves ujjakkal.
2. Ezután helyezze a nedves **elektróda lapot** az egyes **kezelőegységek** hátoldalára. Gondoskodjon arról, hogy szorosan illeszkedjen a központi téglalapra. Lehet, hogy kissé meg kell igazítani, hogy az **elektróda lap** rásimuljon a **kezelőegység** tetejére.

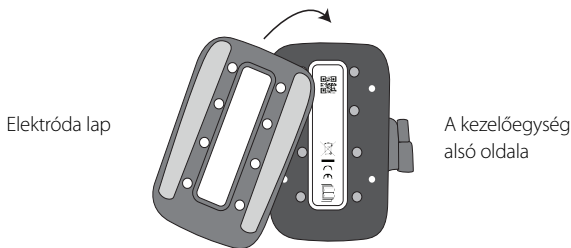

- i** Fontos, hogy csak az **elektróda lapot**, ne az egész **kezelőegységet** nedvesítse be.

## 4.5. Az eszköz töltése

Az első használat előtt töltsse a **kezelőegységeket**. Az első töltés kb. 6 órát vesz igénybe. A további töltések kb. 3 órát vesznek igénybe. Javasoljuk, hogy minden egyes kezelés előtt töltsse fel az eszközt.


1. Távolítsa el az **elektróda lapokat**, mielőtt a **kezelőegységeket** a **tartóba/töltőkészülékbe** helyezi.
2. Csatlakoztassa az üres **tartót/töltőkészüléket** az áramellátásra. A 2 **töltésjelző lámpa** folyamatosan zölden világít.
3. Helyezze a **kezelőegységeket** a töltőkészülékbe úgy, hogy azok a kialakított mélyedésekbe illeszkedjenek.
  - Amikor a **kezelőegység** töltődik, a narancssárga **akkumulátor/hibajelző lámpa** villog a **kezelőegységen**.
  - Teljes töltöttség esetén az **akkumulátor/hibajelző lámpa** (bal) kikapcsol, és a zöld **üzemjelző lámpa** (középső) folyamatosan zölden világít.
4. Feltöltés után húzza ki a **tartót/töltőkészüléket** az áramforrásból.

## 5. Kezelési terv

---

- ⚠ Tiszta, egészséges bőrön való használatra (lásd az 1. Figyelmeztetések és ellenjavallatok részt).
- Kezelje a célterületet kezelési menetenként 15 percen keresztül (lásd az illusztrációt).
- Nagyobb testrészeken, mint például a has vagy a fenék, a **kezelőegységet** a célterülettel szomszédos területre helyezheti és újabb 15 percen keresztül használhatja. Ezt a célterület teljes lefedéséig folytathatja.
- Próbálja elkerülni a hézagokat és az átfedéseket.
- Soha ne használja a Silk'n Lipo eszközt pontosan azonos területen egy kezelési menet alatt.
- Napi használatra, de hetente legfeljebb 3 alkalommal használja az adott területen. Folytassa a kívánt eredmény eléréséig.



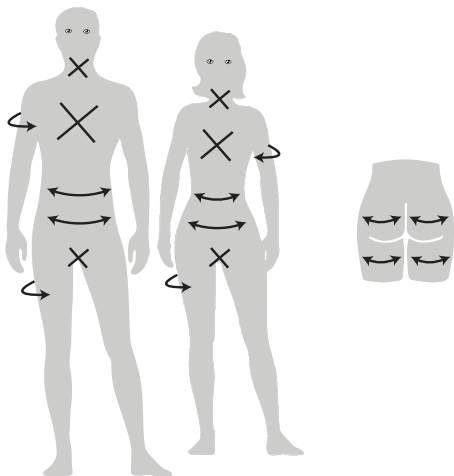

## 6. Mire számíthat – Silk'n Lipo

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az **összes figyelmeztetést és ellenjavallatot**, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Ugyanakkor minden energiaalapú eszköz, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, némi kockázatot von maga után. Ezért fontos, hogy megértse és elfogadja a kockázatokat és szövődményeket, amelyek előfordulhatnak.

### **Bőrpír**

A kezelt terület kipirosodhat, ami a kezelés után eltűnik.

### **Izomfájdalom**

Mint minden edzés esetén, bizonyos mértékű izomfájdalom léphet fel a kezelés után, de ez egy-két nap után elmúlik. Ennek bekövetkezése esetén néhány kezelési meneten keresztül alacsony EMS szintet használjon, amíg a fájdalom el nem múlik.

### **Bőrirritáció**

Bár nagyon ritka, a bőr hosszú időre kipirosodhat, vagy pattanás jelenhet meg. Azonnal hagyja abba a használatot, és csak akkor kezelje az adott területet, ha a bőrirritáció elmúlt.

## Fejfájás

Nagyon ritkán előfordulhat, hogy az eszköz használatának megkezdésekor furcsán érzi magát. Ha ez megtörténik, üljön le a kezelés közben, vagy ne használja az eszközt addig, amíg nem érzi magát jól.

## Allergiás reakció

Ha allergiás reakciói vannak az eszközre vagy tartozékaira, ne használja az eszközt.

- i** Azonnal hagyja abba a használatát, ha ezen hatások valamelyike súlyosbodik.
- i** Keresse fel orvosát, amennyiben a hatások nem múlnak el 2-3 napon belül.

## 7. Kezdjük el!

A kezelés a Silk'n Lipo-val egyszerű. Csak kövesse ezeket a lépéseket minden kezelni kívánt testrészen.

1. Tiszta, egészséges bőrön használja (lásd az 1. Figyelmeztetések és ellenjavallatok. részt).
2. Használat előtt ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő töltöttségét. Ha az **akkumulátor/hiba lámpa** narancssárga és lassan villog, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
3. Minden kezelés előtt nedvesítse meg az **elektróda lapot** nedves kendővel vagy nedves ujjával, és helyezze azokat a **kezelőegységekre** (lásd a 4.4. Az elektróda lapok nedvesítése. részt). Ezután csatlakoztasson egy vagy több **kezelőegységet** az **övre** (lásd az 4.1. A részek csatlakoztatása. részt).
4. Válassza le az egyik **csatlakozót** az egyik oldalon, majd helyezze az **övet** a kezelni kívánt terület köré. Ezután csatlakoztassa újra a leválasztott oldalt.
5. Állítsa be az **öv** feszességét úgy, hogy a **kezelőegység** jól érintkezzen a bőrrel, és az **öv** stabil és rögzített legyen a testhez.

**i** Ha az **öv** nem feszül a bőréhez, az EMS energia lecsatlakozhat. Ennek bekövetkezése esetén húzza meg az **övet**, és nyomja meg a **+ gombot** a szükséges EMS energiaszint kiválasztásához.

6. **Bekapcsolás.** A vezérlők látható helyzetében nyomja meg a **kezelőgombot** az egyes **kezelőegységeken**. A zöld és a narancssárga **jelzőlámpa** világít. A narancssárga **jelzőlámpa** kb. egy másodperc elteltével kikapcsol, és a **kezelőegység** egyszer rezeg. Amikor a **kezelőegység** jól érintkezik a bőrrel, a zöld **üzemjelző lámpa** lassan villog, és a lézereenergia működésbe lép.

## 7. Az EMS szint megváltoztatása:

- **A növeléshez:** Röviden nyomja meg a **+ gombot** annyiszor, amennyiszor a kényelmes EMS szint beállításához szükséges. Az **üzemjelző lámpa** gyorsabban villog, amint növeli az EMS szintet.

**i** A **+ gomb** hosszú megnyomásával az EMS szint továbbra is csak egy fokozattal nő.

- **A csökkentéshez:** Röviden nyomja meg a **- gombot**, amennyiszor szükséges (lásd a 4.2. Vezérlők és beállítások. részt).

**i** A **- gomb** hosszú megnyomásával az EMS szint nullára állítható vissza.

## 8. Minden területet 15 percen keresztül kezeljen.

Tartsa a **kezelőegységet** a helyén, és az eszköz legfeljebb 15 percen keresztül lesz bekapcsolva. Néhány másodpercenként rezgés érezhető. A rezgések a normál kezelési rutin részei. A 15 perc elteltével 3 rezgést érez, nem kerül sor energia kibocsátására és az eszköz automatikusan kikapcsol.

**i** A készüléknek **15 perc letelte** előtti kikapcsolásához nyomja meg hosszan a **kezelőgombot**. 2 rezgést érez a készülék kikapcsolása előtt.

## 9. Ha szeretne egy másik területet kezelni (az éppen most kezelt terület mellett vagy más testrészen), nedvesítse be az **elektróda lapot**, és mozgassa a **kezelőegységet** a következő helyre.

**i** Próbálja elkerülni a hézagokat és az átfedéseket.

**i** Ha az eszközt más testrészt helyezi, és a **kezelőegység** nem jól érintkezik a bőrrel, az EMS szint visszaáll nullára. Ha ez bekövetkezik, gondoskodjon arról, hogy a **kezelőegység** jól érintkezzen bőrével, majd röviden nyomja meg a **kezelőgombot** az eszköz újraindításához, majd a **+ gombot** az EMS szint növeléséhez.


## 8. Tisztítás és karbantartás

---

### 8.1. Az kezelőegységek és a töltőkészülék tisztítása

Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a **kezelőegységet** minden használat után, a **tartót/töltőkészüléket** pedig havonta egyszer.

Tisztítás előtt:

- Válassza le a **kezelőegységet** az összes többi részről (**öv, elektróda lapok, csatlakozók, tartó/töltőkészülék**). Húzza ki a **tartó/töltőkészüléket** az áramforrásból.
  - Semmilyen rész tisztításához ne használjon csiszoló tisztítószeret vagy vegyszereket.
  - Tisztítsa meg a **kezelőegységet** és a **tartó/töltőkészüléket** nedves törölkendővel, enyhe mosószerrel, majd tiszta kendővel törölje szárazra.
-  Ne tisztítsa a részeket mosogatógében.

## 8.2. Az elektróda lapok tisztítása

- Minden használat után törölje szárazra az **elektróda lapokat** egy kendővel.
- Csak azután tárolja azokat zárt dobozban vagy fiókban, miután teljesen megszáradtak.

## 8.3. Az elektróda lapok cseréje

- Ne használja az **elektróda lapokat**, ha sérültek. Ez esetben cserélje azokat.

## 8.4. Az öv tisztítása

Az **öv** anyagai: **Külső:** Nejlon / **Középső réteg:** SBR / **Belső:** Nejlon.

Kövesse a tisztítással kapcsolatos utasításokat.



Csak kézzel mossa



Ne tisztítsa  
vegytisztítással



Ne öblítse



Ne szárítsa  
szárítógépben



Ne vasalja

## 8.5. Tárolás

- Javasoljuk, hogy tisztítás után helyezze vissza a **kezelőegységet** a **tartóba/töltőkészülékbe**.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, tárolja a különböző részeket az eredeti csomagolásban, tiszta, száraz helyen, hogy védje a por ellen.
- Húzza ki a **tartót/töltőkészüléket** az áramforrásból.

## 9. Részek és cserealkatrészek

Csere **kezelőegységeket, elektróda lapokat** vagy **öveket** azon forgalmazón keresztül vásárolhat, ahol az eszközt vásárolta, vagy rendelhet weboldalunkról: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 10. Hibaelhárítás

Csak jogosultsággal rendelkező személyzet végezhet javításokat a készülékén. Ne próbálja meg módosítani, felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának. Valamint elveszíti a jótállást is.

Probléma	Ellenőrzés
A készülékem nem indul.	Gondoskodjon a következőkről: <ul style="list-style-type: none"><li>• a <b>kezelőegység</b> fel van töltve.</li><li>• a bekapcsoláshoz nyomja meg a <b>kezelőgombot</b>.</li><li>• az <b>üzemjelző lámpa</b> folyamatosan világít.</li></ul>
Nem érzem az elektromos stimulációt, vagy úgy tűnik, hogy az EMS szint túl alacsony.	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none"><li>• az <b>elektróda lap</b> nedves legyen.</li><li>• a <b>kezelőegység</b> jól érintkezzen bőrével és</li><li>• az <b>öv</b> megfelelően legyen rögzítve testére.</li></ul>
Nem tudom megváltoztatni az EMS szintet.	Ellenőrizze, hogy a <b>kezelőegység</b> fel van-e töltve.
A <b>jelzőlámpák</b> mindig világítanak.	Rendszerhiba van.

 Probléma vagy kérdés esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

## 11. Ügyfélszolgálat

---

További információkért látogasson el a weboldalunkra: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető és letölthető a weboldalunkról. A váratlan műveletek vagy események bejelentése miatt vagy a készülékkel kapcsolatos bármely más probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a Silk'n ügyfélszolgálatával.

Elérhetőségeink a következők:

Ország	Szervizszám	Email
Belgium	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Franciaország	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Németország	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservice@inno-essentials.de">kundenservice@inno-essentials.de</a>
Olaszország		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Hollandia	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Spanyolország	900 823 302	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Egyesült Királyság	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Egyéb országok esetén	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.com">info@silkn.com</a>

## 12. Jótállás

---

Tekintse meg a Silk'n jótállási jegyét.

## 13. Ártalmatlanítás

---

Ha a termék az életciklusa végéhez jut, kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait.



A csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőben helyezze el. A hullámkarton, kartonpapír és fólia hulladékot szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezze.



Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként. Ez biztosítja, hogy az eszköz szakszerűen van ártalmatlanítva, és megakadályozza\* a káros anyagok környezetbe jutását. Gondoskodjon róla, hogy hulladékként való elhelyezés előtt az eszköz lemerített állapotban legyen.

\*Termékek a következő címkézéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

## 14. Műszaki adatok




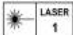
Modellszám	H5001 (eszköz); H5002 (töltőkészülék)
Technológia	Alacsony szintű lézertérápia (LLLT) Elektromos izomstimuláció (EMS)
Töltőkészülék	Bemenet 12 VDC, max. 1,5 A Egyszerre 2 modul töltése
Modul tápellátása	Li-ion akkumulátor, 3,7 V, 2600 mA
Adapter modellek	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adapter besorolása Bemenet: Kimenő teljesítmény:	100-240 VAC, 50-60Hz, max. 0,6A 12 VDC, 1,5A
<b>LLLT</b> - Dióda hullámhossza - Dióda teljesítménye	658 nm +/- 8nm 100 mW (max.)
<b>EMS</b> - Impulzus amplitúdó	0-32 mA 1000 ohm terhelésre
- Kimeneti feszültség	Állítható 0-32V, max. kimenet 32V csúcstól csúcsig 1000 ohm terhelésre.
- Bekapcsolási idő	Állítható, 20~2400 ezredmásodperc
- Kikapcsolási idő	Állítható, 20~2400 ezredmásodperc
- Bemelegítési idő	Állítható, 22~800 ezredmásodperc, 22 ezredmásodperc/lépés. A „bekapcsolási” idő nő és csökken.
- Impulzus ráta	30~50Hz

- Impulzus szélesség	350~450µs
- Időzítő	15 perc
- Hullámgörbe	Szimmetrikus két-fázisú téglalap impulzus
- Tűréshatár	A beállításoknál +/-5%-os tűrés, a kimeneti intenzitásnál +/- 20%-os tűrés lehetséges.
Tömeg	Modul: 300gr Töltőkészülék: 215gr
A használatok közötti szállítás és tárolás, valamint tárolási körülmények a következők	Hőmérséklet: mínusz 40° - 70°C Relatív páratartalom: 10% – 90% Légnyomás: 500 - 1060hPa
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 5° - 40°C Relatív páratartalom: 15% – 90% Légnyomás: 700 - 1060hPa
A használatok között a minimum tárolási hőmérsékletig eltelt idő minimum üzemi hőmérsékleten, 20°C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
A használatok között a maximum tárolási hőmérsékletig eltelt idő maximum üzemi hőmérsékleten, 20°C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
Élettartam	3 év



## 15. Jelek és szimbólumok

Ez a használati útmutató az Európai Unió hatályban lévő szabványain és jogszabályain alapszik. Külföldi tartózkodás esetén tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket.

	Megfelelőségi nyilatkozat: A jelen szimbólummal ellátott termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség hatályos jogszabályainak.
IP22	A készülék tárgyak, pl. ujjak behelyezése ellen védett.
	Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként.
	Kövesse a használati utasítást.
	1. osztályú lézertermék.

## Jogi nyilatkozat

A Home Skinovations Ltd fenntartja a jogot a termékeinek vagy előírásainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations Ltd nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt vagy szabadalmi jogot.

A Home Skinovations Ltd. kifejezett írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmilyen elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Home Skinovations Ltd szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a jelen a dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve ha ehhez a Home Skinovations Ltd írásos engedély formájában hozzájárult.

A Silk'n és a Silk'n logó a Home Skinovations Ltd bejegyzett védjegye, székhelye Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.





PB114120A

  
HomeSkinovations™

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) • [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

InnoEssentials International

Donk 1b, 2991 LE Barendrecht

The Netherlands