

SKINERA™

Beautify your world

IPL Permanent Hair Removal Device I00k

H3230


*Intense Pulsed Light
Technológiával*





HU

Használati utasítás

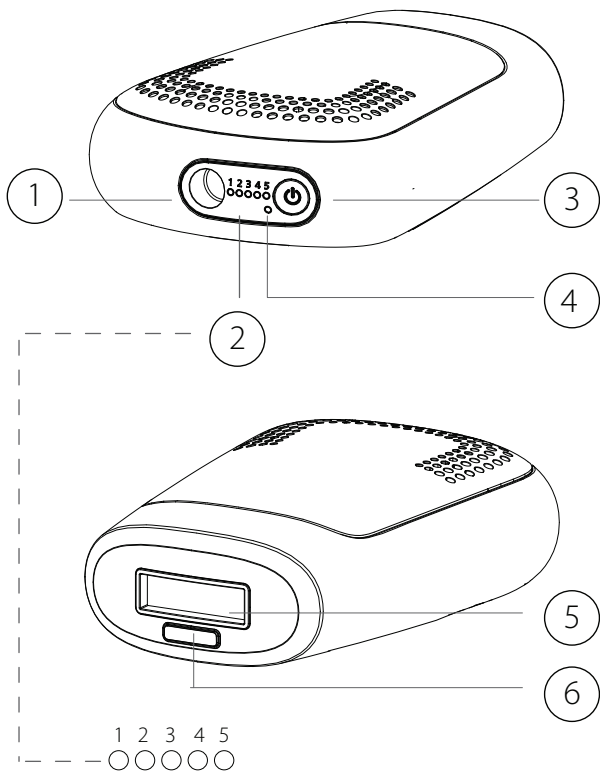IPL Permanent Hair Removal Device I00k



HAIR	SKIN					
		Energy 1-5	Energy 1-5	Energy 1-4	×	×
	Energy 1-5	Energy 1-5	Energy 1-4	Energy 1-3	Energy 1-2	×

Tartalomjegyzék

1.	Ismerje meg a Skinera™ IPL szőrtelenítő készüléket	2
2.	A Skinera™ IPL készülékkel kapcsolatos biztonsági információk	3
3.	Ellenjavallatok és figyelmeztetések.....	3
4.	Ne használja a Skinera™ IPL készüléket, ha:.....	5
5.	Konzultáljon orvosával a használat előtt, ha:	6
6.	Biztonsági tanácsok.....	6
7.	Lehetséges mellékhatások.....	7
8.	Hosszú távú szőrtelenítés Skinera™ IPL módra	9
9.	Kezdjük el	12
10.	A kezelés után	14
11.	Karbantartás	15
12.	Hibaelhárítás.....	15
13.	Ügyfélszolgálat	16
15.	Ártalmatlanítás	16
16.	Műszaki adatok	17
17.	Jelek és szimbólumok.....	18

Ismerje meg a Skinera™ IPL szőrtelenítő készüléket 1.

A Skinera™ IPL otthoni használatra tervezett, fényalapú tartós szőrtelenítő készülék. A Skinera™ IPL rendkívül hatékony elektromos készülék, ezért használata során mindig tartsa szem előtt a biztonságot. Használat előtt feltétlenül olvassa el az **összes** figyelmeztetést, ellenjavallatot és biztonsági óvintézkedést, és szigorúan tartsa be őket. Javasoljuk, hogy minden kezelés előtt újból olvassa végig a használati útmutatót.

1.1. A csomag tartalma

A Skinera™ IPL csomag tartalma:

- Szőrtelenítő készülék
- Adapter
- Kezelési útmutató

1.2. A készülék leírása

Tekintse meg a használati útmutató elején található ábrát, hogy megtekinthesse, hol találhatóak a Silk'n Jewel egyes funkciói.

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Adapter csatlakozó | 5. Kezelőfelület |
| 2. Energiaszint-jelző (1–5.) | 6. Bőrszínérzékelő |
| 3. Kezelőgomb | |
| 4. Készenléti lámpa | |

1.3. Rendeltetészerű használat

A Skinera™ IPL készüléket a nem kívánt szőrszálak eltávolítására, valamint tartós vagy végleges szőrtelenítésre tervezték. A végleges szőrtelenítés azt jelenti, hogy egy kezeléssorozat után hosszú távú, stabil csökkenés tapasztalható a visszanövő szőrszálak számában. A Skinera™ IPL segítségével eltávolíthatja a nem kívánt testszőrzetet. A szőrtelenítő könnyedén használható a következő felületeken: hónalj, bikinivonal, karok, lábak, arc, hát és mellkas.

2. A Skinera™ IPL készülékel kapcsolatos biztonsági információk


A Skinera IPL készülék esetében a biztonság a legfontosabb

Az otthoni használatra tervezett villanófényes technológiát (**Intense Pulsed Light™, IPL**) technológiát használó **Skinera** alacsonyabb energiafelhasználással nagyobb biztonságot tesz lehetővé. A **IPL**-technológia a többi villanófény alapú szőrtelenítő készülék energiafelhasználásának töredékét használja a hosszú távú eredmények eléréséhez. Az alacsony energiafelhasználás csökkenti a sérülések vagy szövődmények kockázatát, valamint hozzájárul a felhasználó általános biztonságához.

3. Ellenjavallatok és figyelmeztetések

A **Skinera™ IPL** készüléket nem mindenki használhatja.


A lézeres vagy intenzív villanófényes fényforrással történő szőreltávolítás bizonyos személyek esetében növelheti a szőrnövekedést. A jelenleg elérhető adatok alapján ilyen tekintetben a legmagasabb kockázati csoportba a földközi-tengeri, a közel-keleti és a dél-ázsiai nők tartoznak, ha a készüléket az arcukon és a nyakukon használják. További információkért látogasson el a www.skinera.eu honlapjára.


 Gyerekek, mozgáskorlátozottak, korlátozott szenzoriális képességekkel és értelmi fogyatékkal élők, valamint a készülék használatában járatlan vagy azt nem ismerő felhasználók számára a készülék használata tilos. Ne engedje a gyerekeknek, hogy a készülékkel játsszanak.


 Leburnult vagy nemrégiben a napnak kitett bőrön (ideértve a szolárium használatát) ne használja a készüléket 2–5 energiaszinteken. Lásd a(z) 6.1 fejezetet.

 A kezelt felületeket óvja a napfénytől.

 Soha ne használja a készüléket a szemek környékén. A készülék infravörös fényt bocsát ki, amely károsodást okozhat.


 Ne használja feltöltött vagy toxinokkal kezelt felületeken.

 Ne kezelje a tetovált vagy sminktetovált, sötétbarna vagy fekete színű foltos bőrfelületeket (például nagy szeplőket, májfoltokat vagy szemölcsöket), a mellbimbókat, a nemi szervek környékét és az ajkakat.








 Ne végezzen kezelést ekcémás, pikkelysömörös, sérült bőrfelületeken, nyílt sérüléseken, fertőzött bőrön (ajakherpesz), valamint szervi vagy emésztőrendszeri betegségekkel (például diabétesszel) járó bőrállapot esetén.

 Ne kezeljen korábban herpesszel fertőzött bőrfelületeket.

 Ne használja a készüléket terhesség vagy szoptatás esetén.

 Ne használja a készüléket olyan területeken, ahol nem szeretné eltávolítani a szőrt. A szőrtelenítés eredménye tartós.

 Kezelésenként egy bőrfelületet mindig csak egyszer kezeljen!

-  Azonnal hagyja abba a kezelést, ha bőrpírt, hólyagosodást vagy égést tapasztal.
-  Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használjon alacsonyabb energiaszintet.
-  Vegye ki az összes ékszert kezelése előtt.
-  Tartsa mindig elérhető közelségben a hálózati adaptert, hogy sürgős esetben azonnal tudja kihúzni a konnektorból.
-  A készüléket tartsa víztől távol! Ne használja a készüléket kádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb, vizet tartalmazó edények közelében. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan leeshet, lelöködhet vagy víz közelébe kerülhet. Fennáll az áramütés veszélye. Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.
-  Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a konnektorhoz. Tartsa mindig elérhető közelségben a hálózati adaptert, hogy sürgős esetben azonnal tudja kihúzni a konnektorból.
-  Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a **Skinera™ IPL** készüléket. Ezzel veszélyes elektromos alkatrészeknek vagy villanófényes energiának teheti ki magát. Súlyos sérüléseket okozhat magának, valamint elveszíti a jótállást is.

4. Ne használja a **Skinera™ IPL** készüléket, ha:

a **Invention Works B.V.** nem ajánlja a csatlakozódugó, a kiegészítők és a tartozékok használatát.

a készülék tápkábele vagy csatlakozódugója sérült. A tápkábelt tartsa távol a hőforrásoktól.

használat közben füstöt érzel.

a készülék nem működik rendesen, vagy ha sérültnek tűnik.

a *bőrszínérzékelő* megrepedt vagy elromlott;

a *külső burok* megrepedt vagy szétesőben van.

A fenti esetek bármelyikében lépjen kapcsolatba a **Skinera** ügyfélszolgálatával.

5. Konzultáljon orvosával a használat előtt, ha:

korábban keloidos hegképződése volt;

epilepsziás;

fényérzékenységgel kapcsolatos betegségben szenved (pl. porfíria, polimorfikus fényerupció, csalánkiütés, lupus stb.);

korábban bőrrákban szenvedett, vagy ha a bőrén potenciálisan rosszindulatú elváltozások vannak;

az elmúlt három hónapban sugár- vagy kemoterápiás kezelésben részesült;

az elmúlt hat hónapban szakorvos által felírt gyógyszereket használt a bőrén;

bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa véleménye szerint veszélyessé tenné a kezelés elvégzését.

6. Biztonsági tanácsok

Az alábbi információk segítenek a készülék biztonságos használatában.

6.1. Napfénynek való kitettség

A készülék legalacsonyabb energiaszintje (1) még a napfénynek való kitettség után is biztonságosan használható.

A 2–5 energiaszintek használata esetén kerülje a napfényt **4 héttel a kezelés előtt** és **2 héttel utána**. Ezt azért javasoljuk, mert a nagyobb mennyiségű melanin jelenléte nagyobb kockázatnak teszi ki a bőrt bármilyen fényalapú szőrtelenítéskor.

Ez **minden** bőrtípusra vonatkozik, ideértve a nehezen barnulókat is.

Védje a frissen kezelt bőrfelületet a napfénytől: kenje be a bőrét 30-as vagy magasabb faktorszámú naptejjel minden kezelés után **2 héten át**.

6.2. A szemek villanófény elleni védelme

Bár a készülék alkalmas az arcszőrzet eltávolítására, fordítson különleges figyelmet a szemek védelmére.

! Soha ne használja a készüléket a szemek környékén. A készülék infravörös fényt bocsát ki, amely károsodást okozhat.

6.3. Sebek és fertőzések

A kezelés előtt várja meg, amíg az érintett terület regenerálódik.

7. Lehetséges mellékhatások

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Ugyanakkor minden kozmetikai eljárás, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, némi kockázatot von maga után. Fontos tehát, hogy megértse és elfogadja az otthoni használatra tervezett, villanófényes szőrtelenítő rendszerek kockázatait és szövődményeit.

Nem kívánt hatások	Kockázat
<p>Enyhe bőrdiszkomfort</p> <p>Az otthoni használatra tervezett villanófényes szőrtelenítés általában problémamentes. Az eljárás azonban bizonyos felhasználók esetén enyhe kellemetlenséggel járhat. Ez általában a kezelt bőrfelületeken tapasztalt enyhe szúró érzéssel írható le. A szúró érzés a kezelés alatt vagy után léphet fel.</p>	Enyhe
<p>Ezen az apró kellemetlenségen kívül minden más rendellenesnek számít. Ebben az esetben ne folytassa a Skinera™ IPL használatát, mert bőre nem tűri a szőrtelenítést, vagy a készülék energiaszintje túl magas.</p>	

Nem kívánt hatások	Kockázat
<p>Bőrpír A készülék használata után azonnal vagy 24 órán belül a bőre bepirosodhat. A bőrpír általában 24 órán belül eltűnik. Keresse fel orvosát, amennyiben a bőrpír nem tűnik el 2-3 napon belül. Győződjön meg arról, hogy az önnek kényelmes és a bőrszínének megfelelő energiaszintet használja.</p>	Enyhe
<p>Érzékenyebbé váló bőr A bőr a kezelt területen sokkal érzékenyebb, így előfordulhat bőrszárazság vagy hámlás.</p>	Enyhe
<p>Pigmentációs elváltozások A Skinera™ IPL a szőrtüszőket célozza meg, azon belül is a szőrtüsző pigmentált sejtjeit, valamint magát a szőrtüszőt. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy ideiglenes hiperpigmentáció (fokozott pigmentáció vagy barna elszíneződés) vagy hipopigmentáció (kifehéredés) jelentkezik a környező bőrfelületen. A bőrpigmentációt érintő elváltozások nagyobb arányban fordulhatnak elő sötétebb bőrtónussal vagy jelentősen leburnult bőrrel rendelkező emberek esetén. Az elszíneződés és a bőrpigmentációt érintő elváltozások általában ideiglenesek, a tartós hiper- vagy hipopigmentáció ritka.</p>	Ritka
<p>Fokozott bőrpír és duzzanat Ritka esetekben erőteljes bőrpír és duzzanat léphet fel a kezelt bőrfelületen. Ez a test érzékeny területein gyakoribb. A bőrpír és a duzzanat 2–7 napon belül eltűnik, addig pedig gyakran tegyen rá jeges pakolást. A gyengéd tisztítás engedélyezett, de kerülje a napfényt.</p>	Ritka
<p>Hólyagok és égések Azonnan hagyja abba a készülék használatát! Hűtse le az érintett területet, és használjon égés elleni krémet. A következő kezelést csak a terület teljes gyógyulása után végezze el, és használjon alacsonyabb energiaszintet. Amennyiben a bőre állapota nem normalizálódik 3 napon belül, keresse fel orvosát.</p>	Ritka

8. Hosszú távú szőrtelenítés **Skinera™ IPL** módra

A szőrtelenítés hatékonysága egyénenként eltér, és függ az adott testrésztől, a szőr színétől és a **Skinera™ IPL** alkalmazásának módjától. Egy teljes szőrnövekedési ciklus általában 18–24 hónapig tart. Ezalatt az idő alatt több kezelésre van szükség a tartós eredmények elérése érdekében.

A **Skinera™ IPL** általános szőrtelenítési ütemterve egy teljes szőrnövekedési ciklus során a következő:

1–4. kezelés: a kezelések között két hét teljen el.

5–7. kezelés: a kezelések között négy hét teljen el.

A 8. kezelés után: végezze a kezelést szükség szerint a kívánt eredmények eléréséig.

8.1. Várható kezelési eredmények

Az egyéni eredmények a szőrtípustól és a szőrnövekedést befolyásoló biológiai tényezőktől függenek. Bizonyos felhasználók gyorsabban vagy lassabban reagálnak a kezelésekre átlagos számához képest.

Bőrtípus ¹	Testszőrzet ²	Fénynek való kitétség [J/cm ²]	Testrész	Átlagos kezelési idő	Szőrtelenítés hatékonysága
1-5	Világosbarna –barna	2,5-4	Lábszár vagy comb		60%
			Karok	10-12 kezelés, egyenként kb. 4 hét távolságra egymástól.	50%
			Bikínivonal		60%
			Hónaljak		55%

Bőrtípus ¹	Testszőrzet ²	Fénynek való kitétség [J/cm ²]	Testrész	Átlagos kezelési idő	Szörtelenítés hatékonysága
1-5	Barna-fekete	2,5-4	Lábszár vagy comb	8-10 kezelés, kb. négyhetente.	70%
			Karok		60%
			Bikínivonal		70%
			Hónaljak		65%

¹A bőrtípusok a Fitzpatrick-skálának felelnek meg. Lásd az útmutató elején található bőrszintábrázolást.

²Nem működik fehér testszőrzeten.

8.2. Energiaszint

Az energiaszint meghatározza, hogy a készülék milyen intenzitású villantást bocsát a bőrfelületre. Az energiaszint növekedésével a szőreltávolítási eredmények is javulnak, ezzel együtt azonban megnő az esetleges mellékhatások és szövődmények kockázata is.

A készüléknek 5 energiaszintje van, 1-től (leggyengébb) 5-ig (legerősebb), amelyet 5 *energiaszint-jelző* (az ábra 2. pontja) mutat:


A készülék bekapcsolásával az energiaszint automatikusan az 1. szinten van. Csak egyetlen *energiaszint-jelző* gyullad ki.

Az energiaszint módosításához nyomja meg ismételten a *kezelőgombot* (az ábra 3. pontja) az energiaszint 1-ről 5-re való emeléséhez. Az 5. energiaszinten ismét nyomja meg a *kezelőgombot* az energiaszint 5-ről 1-re való csökkentéséhez.



A kezelési felületnek megfelelő energiaszint meghatározásához olvassa el Az első kezelés előtt című, 9.1-es számú fejezetet.

8.3. Villantásos és csúsztatásos kezelés

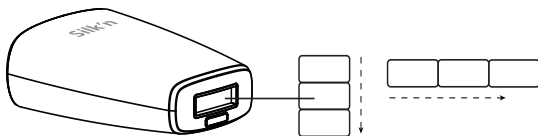

A villantás a legjobb módszer a magas energiaszinteken történő kezelés esetében.

A kezelést soronként végezze (vízszintesen vagy függőlegesen, ahogy a képen látható). Kezdje el a kezelést a sor egyik végén, és haladjon előre a másik végéig. A *kezelőfelületet* nyomja a bőréhez. A *kezelőfelület* ideiglenes benyomódásokat hagy a kezelt felületen, így láthatóvá téve a kezelt felületeket. Minden villantás után vigye a kezelőfelületet a következő kezelendő területre. Folytassa a műveletet a kezelendő felületen. **Kerülje a kihagyásokat és az átfedéseket.**

! Kezelésenként egy bőrfelületet mindig csak egyszer kezeljen!

A csúsztatásos kezelés a legjobb módszer az alacsony energiaszinteken történő kezelés esetében.

Nyomja erősen a készüléket a bőréhez, és lassan csúsztassa el a bőren (vízszintesen vagy függőlegesen, ahogy a képen látható). Ügyeljen arra, hogy a készülék mindig érintkezzen a bőrrel. Alacsonyabb energiaszintek alkalmazása esetén a készüléknek mindössze egy-másfél másodperc újratöltési időre van szüksége. Ez folyamatos villantássorozatot hoz létre. **Olyan sebességgel csúsztassa a készüléket, hogy elkerülje a kihagyásokat és az átfedéseket.**

! **Azonnal hagyja abba a készülék használatát,** amennyiben bőren hólyagosodást vagy égő érzést tapasztal.

8.4. Bőrszínérzékelő

A sötétebb bőrön végzett fényalapú szőrtelenítés során nem kívánt hatások, például égés, hólyagok és bőrszínváltozás (hiper- vagy hipopigmentáció) léphetnek fel. A Skinera™ IPL bőrszínérzékelője automatikusan felismeri bőre színét (az ábra 6. pontja). Ha a bőrtónusa túl sötét a biztonságos használathoz, a készülék nem működik, a bőrszínérzékelő lámpája pedig villogni kezd.

8.5. Mire számíthat a Skinera™ IPL készülékkel történő kezelést követően?

Sok felhasználó számára a Skinera™ IPL készüléken keresztül találkozik először a fényalapú készülékekkel. A kezelés során normális jelenségnek számítanak a következők:

Zaj: a hűtőventilátor működése a hajszárítóéhoz hasonló zajjal jár. Ez normálisnak számít.

Pukkanó hang: minden egyes IPL-villantással.

Meleg vagy csiklandozó érzés: minden egyes villanófény esetén.

Enyhe bőrpír: nem szokatlan, hogy a kezelés alatt vagy közvetlenül utána nagyon enyhe, rózsaszínű bőrszínváltozás lép fel. Ez általában a szőrök közvetlen környékén jelentkezik.

! **Azonnal hagyja abba a kezelést,** ha a teljes bőrfelület bepirosodott.

9. Kezdjük el

A Skinera™ IPL használatához végezze el a következőket:

1. Vegye ki a dobozból a készüléket és a többi alkatrészt.
2. Csatlakoztassa az *adapterkábel*t a készülék aljzatába (az ábra 1. pontja), és csatlakoztassa az *adaptert* egy elektromos csatlakozóaljzatba. Minden energiaszint-jelző kigyullad, majd kikapcsol.

9.1. Az első kezelés előtt

 Vegye ki az összes ékszert kezeléseik előtt.

Döntse el, melyik energiaszint felel meg a bőrének, és melyik felületet kívánja kezelni. A készülék 5 energiaszinttel rendelkezik 1 (legalacsonyabb) és 5 (legmagasabb) között. A megfelelő energiaszint kiválasztásához próbálja ki külön az egyes kezelési felületeken a készüléket (lásd a használati útmutató elején található bőrszintáblázatot).

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a *kezelőgombot*. Kigyullad az 1. *energiaszint-jelző*.
2. Helyezze a *kezelőfelületet* (az ábra 5. pontja) a bőréhez egyetlen villantás elvégzéséhez. Amennyiben nem érez normálistól eltérő kellemetlen érzést, nyomja meg ismét a *kezelőgombot*. Ezzel növeli az energiaszintet. A 2. energiaszinten végezzen egy villantást egy másik bőrfelületen.
3. Folytassa a bőrpróbát a többi energiaszinttel. Használja a bőrszintáblázatban megadott energiaszinteket. Ha egy órán belül nem tapasztal nem kívánt hatást, elkezdheti a teljes kezelést az adott energiaszinten.

 Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használjon alacsonyabb energiaszintet.

Ismételje meg a bőrpróbát minden kezelendő testrészen.

Ezzel készen áll a Skinera™ IPL készülék használatára.

1. A kezelendő bőrfelület legyen borotvált, tiszta, száraz és mentes minden portól, izzadásgátlótól és dezodortól. **Ne gyantázza, húzza vagy tépje ki a szőrt.**
2. Nyomja meg a *kezelőgombot*. A készülék bekapcsol, kigyullad az 1. szint *energiaszint-jelzője*, és a ventilátor hangja hallható lesz.
3. A *kezelőgomb* megnyomása után körülbelül 1 másodperccel kigyullad a *készüléti fény* (az ábra 4. pontja). A készülék ezt követően kész a legalacsonyabb energiaszinten történő használatra.

4. **Állítsa be az energiaszintet.** Nyomja meg ismételten a *kezelőgombot* a kívánt energiaszint eléréséhez. Az *energiaszint-jelző* kigyullad az energiaszint beállításának megjelenítéséhez (lásd a(z) "8.2. Energiaszint" fejezetet).
5. Döntse el, hogy **csúsztatásos** vagy **villantásos** kezelést szeretne-e használni a felületen (lásd a "8.3. Villantásos és csúsztatásos kezelés" részt).
6. Helyezze a *kezelőfelületet* a bőrre (az ábra 6. pontja). Ügyeljen arra, hogy a bőr sima legyen, és ne feszüljön sehol. Amikor a *kezelőfelület* megfelelően érintkezik a bőrrel, a *készüléti fény* lassú ütemben villogni kezd.
7. A készülék először automatikusan meghatározza a bőrszintet, és elindít egy villantást. Ez enyhe meleg és csiklandozó érzést kelt, amit egy pukkanó hang kísérhet.



Ha a bőrtónusa túl sötét a biztonságos használathoz, a készülék nem működik.



Villantásos kezelés esetén távolítsa el a készüléket a bőrtől. A készülék azonnal újratölti magát a következő villantáshoz. A megadott energiaszinttől függően pár másodperc elteltével ismét kigyullad a készüléti fény, és lassan villogni kezd, amint a készüléket a bőrhöz nyomja.

8. Villantásos kezelés esetén ismétlje meg a folyamatot. Csúsztatásos kezelés esetén folytassa a kezelést.
9. Folytassa a villantásos vagy csúsztatásos kezelést a felület teljes kezelésének befejezéséig.



Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben bőrén hólyagosodást vagy égő érzést tapasztal.

10. A kezelés után





A kezelés befejezésekor:

1. Kapcsolja ki a készüléket a *kezelőgomb* lenyomva tartásával. Jegyezze meg, hogy milyen energiaszintet használt, mivel a beállítások törölődnek a készülék kikapcsolásával.

- Húzza ki az *adaptert* az elektromos csatlakozóaljzatból.

11. Karbantartás

Minden kezelés után tisztítsa meg a **Skinera™ IPL** készüléket. A készülék tisztítása:

-  Távolítsa el a készüléket az áramforrásból.
 -  Száraz, tiszta ruha és az elektromos felszerelésekhez készült, speciális tisztítószer segítségével óvatosan törölje le a felületet, ideértve a *kezelőfelületet* is.
 -  Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja az eredeti dobozában.
-  Soha ne merítse víz alá a **Skinera™ IPL** készüléket és annak alkatrészeit.

12. Hibaelhárítás

Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a **Skinera™ IPL** készüléket. **Ezzel veszélyes elektromos alkatrészeknek vagy villanófényes energiának teheti ki magát.** Súlyos sérüléseket okozhat magának, valamint elveszíti a jótállást is.

Probléma	Ellenőrzés
A Skinera™ IPL készülékem nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy az <i>adapter</i> megfelelően csatlakoztatva van-e a készülékhez és egy fali elektromos csatlakozóaljzathoz.
Nincs villanófény, amikor a készülék a bőrömhöz ér.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva és készenléti módban van-e. Győződjön meg arról, hogy a kezelőfelületet egyenletesen odanyomta a bőrhöz. Megtörténhet, hogy a bőre túl sötét.
A bőrszínérzékelő lámpája és a készenléti lámpa villog.	A bőrszín túl sötét.
Egy vagy több lámpa villog.	A készülék tévesen működik.

Ha probléma merül fel vagy kérdése van, lépjen kapcsolatba a **Skinera** ügyfél-

13. Ügyfélszolgálat

További információkért látogasson el a weboldalunkra: www.Skinera.eu. Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető, és letölthető a következő helyről: www.Skinera.eu. Váratlan események vagy a készülékkel kapcsolatos bármely probléma esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Kapcsolati adatok:

Ország	Szervizszám	Email
Franciaország	0800-941298	info@skinera.eu
Németország	04473-3270450	info@skinera.eu
Hollandia	09000-0400492	info@skinera.eu
Spanyolország	807001725	info@skinera.eu
Egyesült Királyság	0800-3586048	info@skinera.eu
Olaszország		info@skinera.eu

15. Ártalmatlanítás







Segítsen a környezet megóvásában. A termék csomagolóanyagát egy újrahasznosítási ponton a típusnak megfelelő anyagcsoporthoz adja le. Ha a termék az életciklusa végéhez jut, kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait.

16. Műszaki adatok

Modellszám	H3230
Lefedett terület mérete	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Technológia	Intense Pulsed Light (IPL)
Max. energiaszint	Max 4J/cm ²
Hullámhossz	475–1200 nm
Használat és biztonság	A bőrszínérzékelő biztosítja a készülék kizárólag a megfelelő bőrtípusokon történő használatát.
Csomag mérete	180x180x100 mm
A rendszer súlya	200 gm
Szállítás és tárolás két használat között és tárolási feltételek	Hőmérséklet: -40 és 70°C között Relatív páratartalom: 10%–90% Légnyomás: 500 és 1060 hPa között
Működési feltételek	Hőmérséklet 10°C és 35°C között Relatív páratartalom: 15%–90% Légnyomás: 700 és 1060 hPa között
A két használat közötti minimális tárolási hőmérséklet és a 20°C-os környezeti hőmérséklettel rendelkező minimális működési hőmérséklet között eltelt idő.	30 perc
A két használat közötti maximális tárolási hőmérséklet és a 20°C-os környezeti hőmérséklettel rendelkező maximális működési hőmérséklet között eltelt idő.	30 perc
Használati mód	Folyamatos

Adaptermodellek és besorolás	KSA24A1200150Hz PSM18x-120L6HS A(z) x és z esetében tekintse meg az országára vagy régiójára vonatkozó jogszabályokat. AC- 100-240 V, 50-60 Hz, 0.5 A DC-12V, 1.5 A
A készülék a tesztek alapján megfelel a következő szabványoknak:	IEC 60335-2-23 (biztonság) EN 55014 (EMC) IEC 62471 (nem lézer fényforrásra vonatkozó biztonsági előírások)
A készülék várható élettartama	5 év

17. Jelek és szimbólumok

	Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik az uniós irányelvek követelményeit.
	II.osztály II. osztály – Az adapter kettős szigeteléssel védett a villamos áramütésekkel szemben.
IP30	A készülék védett a 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű tárgyak (pl. ujjak) behatolásával szemben, az elektromos áramütéssel szembeni védelem érdekében.
	Ne használja nedves környezetben.
	Ne dobja a háztartási hulladékba. Kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait, és segítsen a környezet megóvásában.