

SKINERA™

Beautify your world

HU


MIKRODERMABRÁZIÓ



HU

Használati utasítás

Skinera™ Mikrodermabrázió

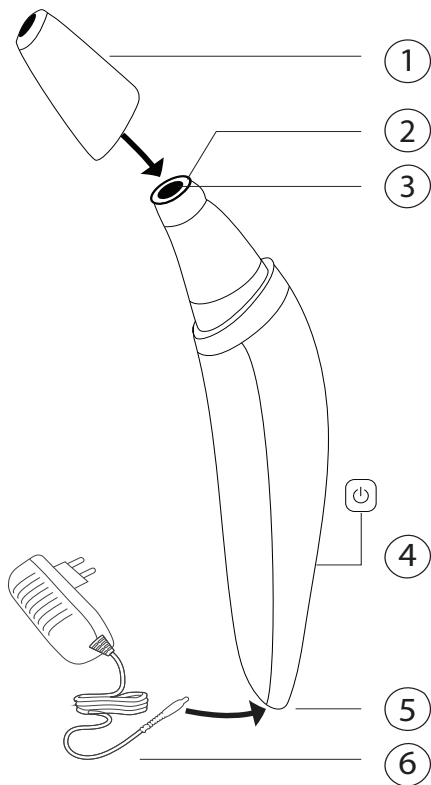

Tartalomjegyzék

1.	Ismerje meg a Skinera™ Mikrodermaráziós készüléket..	2
2.	Ellenjavallatok és figyelmeztetések.....	3
3.	Ne használja a Skinera™ Mikrodermaráziós készüléket, ha:	6
4.	Mire számíthat a Skinera™ Mikrodermarázióval	6
5.	Lehetséges mellékhatások.....	7
6.	Az első kezelés előtt.....	7
7.	Kezdjük el!	9
8.	Karbantartás és tárolás	11
9.	Alkatrészek és fogyóeszközök.....	12
10.	Hibaelhárítás	12
11.	Ügyfélszolgálat	13
13.	Ártalmatlanítás	13
14.	Műszaki adatok	14
15.	Jelek és szimbólumok.....	15

Ismerje meg a Skinera™ Mikrodermabráziós

1. készüléket

A Skinera™ Mikrodermabráziós készülék egy elektromos eszköz. A használat során mindig tartsa szem előtt a biztonságot. A készülék első használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést, az ellenjavallatokat és a biztonsági előírásokat. Fontos, hogy elolvassa és megértse az utasításokat, hogyan kell használni a készüléket, beleértve a használat utáni eljárásokat, és szigorúan tartsa be azokat. Javasoljuk, hogy kezelés előtt újból olvassa végig a használati útmutatót.

I.1. A csomag tartalma

Az Ön Skinera™ Mikrodermabrázióscsomagja ezeket a tételeket tartalmazza.

- Skinera™ Mikrodermabráziós készülék
- AC/DC adapter kábellel
- Szűrőcsomag
- 2 Kezelőfej (Finom és Durva)
- Tartalék gumikupakok

I.2. Az eszköz leírása

A Skinera™ Mikrodermabráziós készülék egy kettős működésű terápiás készülék, amelyet otthoni használatra terveztek. A bőr mikrodermabráziós hámlasztását és vákuum stimulálását egyesíti.

Mikrodermabráziós hámlasztás

Gyengéd, nem dörzshatású hámlasztás a simább, frissebb bőrért.

Javítja a bőr tónusát, tapintását és rugalmasságát.

Segít eltüntetni az öregségi foltokat.

Segít a szem körüli finom ráncok eltüntetésében.

Vákuum stimuláció

Serkentőleg hat a simább, fiatalosabb bőrért.

Felszínre hozza a szennyeződések.

Összegyűjti az elhalt bőrsejteket, hogy megszabaduljon tőlük.

A készülék a következő részekből áll: *kezelőfej* (#1), *gumikupak* (#2), *szűrő*, (#3), *kezelőgomb* (#4), *készülék csatlakozó* (#5), és egy *adapter kábel* (#6). Tekintse meg a használati útmutató elején lévő ábrát, hogy hol találhatóak az eszköz egyes részei.

I.3. Rendeltetészerű használat

A *Skinera™ Mikrodermabráziós* egy olyan eszköz, amely a bőr felső rétegének hámlasztására használható a frissebb megjelenés érdekében. A következők kezelésére használható:

Az arc, a nyak és a kezek bőrének öregedése

Finom arcvonalak

Bőrelszíneződés


Sötét foltok és felszíni hegek

Fakó és a nap által károsodott bőr

A készüléket otthoni használatra tervezték. Ne használja más célra, mint ami ebben a használati utasításban szerepel.


2. Ellenjavallatok és figyelmeztetések

Mindenképpen olvassa el figyelmesen ezt a fejezetet, és vegye figyelembe a figyelmeztetéseket és az ellenjavallatokat.

 Gyerekek, 16 év alatti, mozgásszervi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élők, valamint a készülék használatában járatlan vagy azt nem ismerő felhasználók számára a készülék használata tilos. Ne engedje a gyerekeknek, hogy a készülékkel játszanak.

Ne használja a Skinera™ Mikrodermabráziós készüléket, ha:

 Rosaceában szenved.

 Rosszul kontrollált endokrin rendellenességben szenved, mint cukorbetegség és a pajzsmirigy megbetegedései.










- ❗ Cukorbetegség okozta kóros bőrelváltozása, szisztémás vagy más anyagcsere-betegsége van.
- ❗ Sugárkezelést vagy kemoterápiás kezelést kapott az elmúlt 3 hónapban, vagy ha bőrén potenciális rosszindulatú bőrelváltozások vannak.
- ❗ Az elmúlt hat hónapban szakorvos által felírt gyógyszereket használt a bőrén.
- ❗ Bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa vagy bőrgyógyásza véleménye szerint veszélyessé tenné a kezelés elvégzését.

Ne végezzen kezelést:

- ❗ Aktív ekcémás, pikkelysömörös, sérült bőrfelületeken, nyílt sérüléseken vagy fertőzött bőrön (ajakherpesz), anyajegyeken vagy szemölcsökön, szisztémás és anyagcsere betegség (például cukorbetegség) okozta kóros bőrelváltozásokon.
- ❗ Korábban herpeszrel fertőzött bőrfelületeken.
- ❗ Traumatizált vagy sérült bőrön.
- ☀ Nemrég védelem nélkül napnak kitett bőrön (várjon 1 napot); leburnult vagy napégette bőr esetében várjon 3 napot.

További figyelmeztetések

- ❗ Ne használja a mellbimbókon vagy a nemi szerveken.
- ❗ Ne használja heti 2 alkalomnál többször.
- ❗ Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használja az alacsony szívó fokozatot.

-  Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben bőre nagyon elvörösödött.
-  Távolítsa el minden ékszert a kezelések előtt.
-  Védje bőrét 30-as vagy magasabb faktorú készítménnyel, ha a kezelés után napnak teszi ki a bőrét.
-  Mindig ellenőrizze, hogy a keze és a bőre száraz, mielőtt használja a készüléket, vagy megérinti az adapter csatlakozóját.
-  A készüléket tartsa távol víztől vagy folyadékoktól! Ne használja a készüléket kádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb, vizet tartalmazó edények közelében. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan leeshet, lelöködhet vagy víz vagy bármilyen más folyadék közelébe kerülhet. Fennáll az áramütés veszélye. Azonnal húzza ki és ne használja újra.
-  Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva a konnektorba. Tartsa az AC/DC adaptert mindenkor hozzáférhető helyen, így vészhelyzet esetén könnyen el lehet távolítani az aljzatból. Azonnal húzza ki a készüléket használat után.
-  Ne szállítsa a készüléket az AC/DC adapter kábelnél fogva.
-  Ha a készülék meghibásodik, húzza ki azonnal.
-  Ne próbálja meg átalakítani, felnyitni vagy megjavítani a Silk'n ReVIt Essential készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának.

3. Ne használja a Skinera™ Mikrodermabráziós készüléket, ha:

a **Invention Works B.V.** nem ajánlja az adapter, a kiegészítők és a tartozékok használatát.

a készülék kábele vagy csatlakozódugója sérült. A tápkábelt tartsa távol a hőforrásoktól.

használat közben füstöt érzékel.

a készülék nem működik rendesen, vagy ha sérültnek tűnik.

a külső burok megrepedt vagy szétesőben van.

a készülék vízbe esett.

A fenti esetek bármelyikében lépjen kapcsolatba a Skinera ügyfélszolgálatával.

4. Mire számíthat a Skinera™ Mikrodermabrázióval

A kezelés során normális jelenségnek számítanak a következők:

Búgó hang a készülékből: A szívópumpa működik.

Enyhe bőrpír jelentkezik: Ez néhány órán belül, vagy egy nap alatt elmúlik.



Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben bőre nagyon elvörösödött.



Forduljon orvoshoz, ha bármilyen komplikációt tapasztal.

5. Lehetséges mellékhatások

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Minden kozmetikai eljárás, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, bizonyos fokú kockázatot von maga után. Ezért fontos, hogy megértse és elfogadja a kockázatokat és szövődményeket, amelyek előfordulhatnak.

Nem kívánt hatások	Kockázat
Bőrpír A felszíni hajszálerek kitágulását tapasztalhatja. Ez néhány napig bőrpír fennállását eredményezheti. Emellett néhány hajszálérnél piros foltok jelenhetnek meg, amelyek idővel elmúlnak. Ilyen esetekben, azonnal hűtse le a területet hideg vízzel.	Enyhe
Zúzódás Enyhe zúzódást tapasztalhat, amely 2-3 nap után eltűnik.	Enyhe

Forduljon orvoshoz, ha bármilyen tartós tünetet tapasztal.

6. Az első kezelés előtt


A Skinera™ Mikrodermabrázióhasználatához végezze el a következőket:

1. Vegye ki a dobozból a készüléket és a többi alkatrészt.
2. Csatlakoztassa az *adapter kábelt* a készülék aljzatába és csatlakoztassa az *adaptert* egy elektromos csatlakozóaljzatba.
3. Tekintse át a javaslatokat, hogyan kell használni a ReVIt Essentialt a különböző kezelési területeken.

6.1. Kezelési területek

Azt javasoljuk, hogy alacsony szívó fokozattal kezdje, és néhány használat után térjen át a nagy szívó fokozatra. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, a kezelt területen használja az alacsony szívó fokozatot.

Kezelt terület	Javaslatok
Homlok, arc és áll	Mozgassa a készüléket a bőrén középről kifelé és a hajvonal felé.
Szemek és orr	Használjon rövid felfelé irányuló mozdulatokat a szemöldök környékén. Kerülje el a szemhéjat. Az orrnál egyenes, lefelé irányuló mozdulatokkal kövesse az orr görbületét és az arccsont kontúrját.
Nyak	Az egész nyaki területen használjon egyenes, lefelé irányuló mozdulatokat.

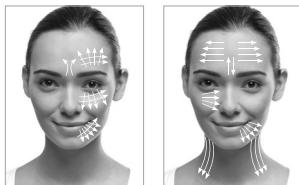

Kezdetben minden területen 2-4-szer végezze el a kezelést. Ha bőre hozzászokott a kezeléshez, akkor 4-6 alkalommal áthaladhat.

6.2. Skinera™ Mikrodermabráziós Finom és Durva fej


A készülék két kezelő *fej*el rendelkezik. Azt javasoljuk, először a Finom fejet használja.

Használja a finom *fejet* általános kezeléshez vagy a finom befejezéshez.

Használja a Durva *fejet* a nagy igénybevételű hámlasztáshoz.

Fejcsere:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
2. Távolítsa el a jelenlegi *fej*et (#1) a készülékből és cserélje ki a másik *fej*el. Győződjön meg róla használat előtt, hogy a *fej* szorosan illeszkedik a helyére.

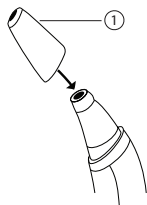

7. Kezdjük el!

Jó úton halad az üdébb, simább bőrért! A kezelés a **Skinera™ Mikrodermabrázióval** egyszerű. Csak kövesse ezeket a lépéseket minden kezelni kívánt területen. A teljes kezelés kb. 5 percig tart.

15.1 Ajánlott óvintézkedések

Mielőtt először kezelne egy területet, végezzen próbát egy kis bőrfelületen. Ha nincs mellékhatás, akkor elkezdheti kezelni azt a területet.

Használja az alacsony szívó fokozatot az első 2-3 kezelés során.

Nem javasoljuk, hogy heti 2 alkalomnál többször használja a készüléket.



Hagyja azonnal abba a használatát, ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal.

15.2 Kezelési lépések

1. Győződjön meg arról, hogy bőre tiszta, száraz és por-, krém- vagy gélmentes.
2. Győződjön meg róla, hogy a *gumikupak* (#2), a *szűrő* (#3), és a *fej* (#1) szorosan illeszkedik a helyére. Az első néhány kezelés során a *Finom fejet* használja.
3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a *kezelőgombot* (#4). Az Ön ReVIt Essential készüléke használatra kész alacsony szívó fokozatban.
4. Használja a *fejet* határozottan a bőrén úgy, hogy úgy érezze a szívást.
5. A "6.1. Kezelési területek" fejezetben javasoltak szerint kezeljen át minden területet.
6. Nyomja meg a *kezelőgombot* még egyszer, ha az alacsony szívásról a nagy szívó fokozatra akar kapcsolni.
7. A kezelés után a készülék kikapcsolásához nyomja meg röviden a *kezelőgombot* egyszer vagy kétszer, attól függően, hogy melyik szívó fokozatot használja.
8. Húzza ki a készüléket, és helyezze vissza a ReVIt Essential-t az eredeti dobozába. Lásd a "8. Karbantartás és tárolás" fejezetet.







7.1. A kezelés után

Kerülje a közvetlen napsugárzást közvetlenül a kezelés után, és használjon 30 SPF vagy magasabb faktorú készítményt.

Érdemes lehet arcpakolást, illetve nappali vagy éjszakai krémet alkalmazni.

8. Karbantartás és tárolás

Minden kezelés után tisztítsa meg és tárolja megfelelően a **Skinera™ Mikrodermabráziós** készüléket.


-  Először húzza ki a készüléket az áramforrásból.
-  A készülék tisztításához törölje le azt egy tiszta, száraz ruhával. 70%-nál kevesebb alkoholt tartalmazó tisztítófolyadékot, vagy más, nem súroló hatású tisztítófolyadékot használjon. Soha ne használjon acetont vagy egyéb súroló hatású anyagot, mert ezek károsíthatják a készüléket.
-  A *fej* megtisztításához először távolítsa el azt a készülékből, mossa meg szappannal és vízzel, majd alaposan szárítsa meg.
-  A *szűrő* megtisztításához először távolítsa el azt a készülékből, távolítsa el egy puha kefével a törmeléket, és helyezze vissza a készülékbe.
-  Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja az eredeti dobozában.
-  A *fejek* kivételével soha ne merítse a **Skinera™ Mikrodermabráziós** készüléket vízbe.

8.1. A szűrő cseréje

A *szűrőt* meg kell tisztítani, vagy cserélni kell a felhalmozódott bőrtörmelék miatt. Azt javasoljuk, hogy ezt végezze néhány kezelés után.

A szűrő kicseréléséhez

1. Távolítsa el a *fejet* a készülékből. Akkor meglátja a *gumikupakot* és a kis fekete *szűrőt*.
2. Távolítsa el a *gumikupakot* (#2), és aztán távolítsa el a *szűrőt* (#3).
3. A *szűrő* megtisztításához távolítsa el egy kefével a törmeléket, majd helyezze vissza a készülékbe. A *szűrő* cseréjéhez távolítsa el a jelenlegi *szűrőt* és helyezze be az újat.

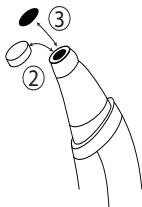

- Helyezze vissza a *gumikupakot* a helyére, majd tegye vissza a *fejet* a készülékre, meggyőződve róla, hogy az szorosan illeszkedik.

8.2. A fej cseréje

Javasoljuk, hogy hat havonta cserélje a *fejet* vagy korábban, ha a fej hámlasztó vége megsérült.

9. Alkatrészek és fogyóeszközök

További *szűrőket* és *fejet* rendelhet honlapunkról: www.inno-webshop.com
Lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával a *gumisapkák* vagy az *AC/DC adapter* cseréjéhez.

10. Hibaelhárítás

Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a **Skinera™ Mikrodermabráziós** készüléket. Ezzel veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát és súlyos sérüléseket okozhat magának. Valamint elveszíti a jótállást is.

Probléma	Ellenőrzés
A Skinera™ Mikrodermabráziós készülékem nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy az <i>adapter</i> megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez, hogy be van-e dugva egy elektromos csatlakozóaljzatba, és hogy megnyomta-e a <i>kezelőgombot</i> .
Nem érzek szívást, amikor a készülékkel megérintem a bőröm.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, ellenőrizze a <i>szűrőt</i> , a <i>gumisapkát</i> és a <i>fejet</i> , hogy helyesen vannak-e behelyezve a készülékbe.



Csak jogosultsággal rendelkező személyzet végezhet javításokat a készülékén. Ha probléma merül fel vagy kérdése van, lépjen kapcsolatba a **Skinera** ügyfélszolgálatával.



Ha a készülék meghibásodik, húzza ki azonnal.

11. Ügyfélszolgálat

További információkért látogasson el a weboldalunkra: www.skinera.eu. Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető, és letölthető a következő helyről: www.skinera.eu.

A váratlan művele **Skinera** ügyfélszolgálatával, vagy ha bármilyen más probléma van a készülékkel. Elérhetőségeink a következők:

Country	Service number	Email
Egyesült Királyság	0800-3586048	info@skinera.eu
Németország	04473-3270450	info@skinera.eu
Franciaország	0800-941298	info@skinera.eu
Olaszország	-	info@skinera.eu
Spanyolország	807001725	info@skinera.eu
Hollandia	0900-0400492	info@skinera.eu

13. Ártalmatlanítás








Segítsen megvédeni a környezetet. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal, és kövesse az országában érvényes, az elektronikai eszközök ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályokat.

14. Műszaki adatok

Modellszám	NI4501
Technológia	Légvákuumos fej
Bemeneti teljesítmény	12 V DC, 0,5 A
A rendszer súlya	110 g
A használatok közötti szállítás és tárolás, valamint tárolási körülmények a következők	Hőmérséklet: -40°C és +70°C között Relatív páratartalom: 10% és 90% között Légnyomás: 500–1060 hPa
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10°C és 35°C között Relatív páratartalom: 30% és 75% között Légnyomás: 700–1060 hPa
Adaptermodellek és besorolás	SAW12-050-2100XX XX A csatlakozó típusára utal Bemenet: 100–240V; 50–60 Hz; 0,5 A Kimenő teljesítmény: 12V, 0,5A
A készülék várható élettartama	3 év
Megfelelés	LVD: 2006/95/EC és 2014/35/EU EMC: 2004/108/EC és 2014/30/EU 2011/65/EC RoHS irányelv REACH rendelet EC No. 1907/2006

15. Jelek és szimbólumok

	Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a EU irányelv követelményeit.
	Class III. A készüléket egy extra alacsony feszültségű áramforrás látja el.
	Csak belső használatra.
	Ne használja nedves környezetben.
	Ne dobja a háztartási hulladékba. Kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait, és segítsen a környezet megóvásában. Összhangban a WEEE irányelvvél.